## Лабораторная работа 41.1

# Измерение длины волны лазерного излучения интерференционным методом (метод Юнга)


### 1. Цель работы

Цель работы состоит в изучении законов интерференции света и метода наблюдения интерференции с помощью опыта Юнга.

### 2. Задачи лабораторной работы

Задачей работы является экспериментальное определение длины волны излучения источника монохроматического света (лазера).

# 3. Экспериментальное оборудование, приборы и принадлежности

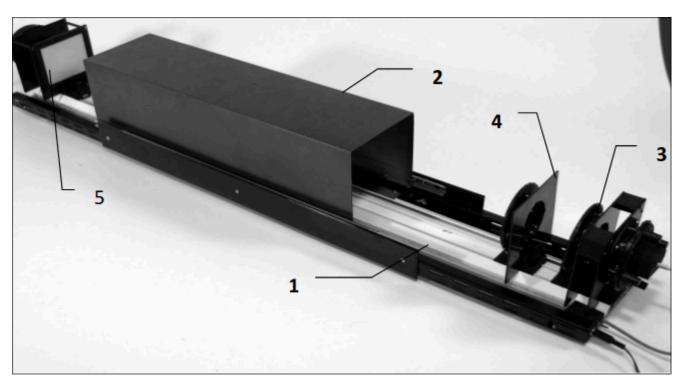

#### 4. Теоретическая часть

Свет представляет собой электромагнитные волны с частотами 410^14 - 7.5 \* 10^14 Гц. Человеческий глаз не способен различать колебания, если они происходят чаще десяти раз в секунду, поэтому он фиксирует только средний поток энергии электромагнитной волны. Усредненная по времени плотность потока энергии волны называется интенсивностью. Согласно уравнениям Максвелла, интенсивность электромагнитной волны равна усредненному по времени вектору Пойнтинга и, следовательно, пропорциональна квадрату амплитуды электрического или магнитного поля в волне. Свет в любом естественном источнике порождается излучением очень большого количества атомов среды, испускающих цуги электромагнитных волн независимо друг от друга. Атом источника света, перейдя в возбужденное состояние в результате теплового движения или взаимодействия с излучением, через некоторое время «высвечивается», испуская цуг электромагнитных волн за время порядка 10 нс, после чего прекращает излучать до следующего возбуждения. Из-за большого количества элементарных излучателей световая волна содержит излучение разных частот, а амплитуда, фаза результирующей волны и пространственная

ориентация вектора электрического поля меняются хаотически.

Замечание. К исключениям можно отнести лазер – генератор волн оптического диапазона, в рабочей зоне которого созданы специальные условия, заставляющие атомы среды излучать согласованно.

Одно из явлений, которое трудно объяснить с точки зрения корпускулярной теории, но которое естественно следует из волновой природы света — интерференция (от лат. inter — между и ferens — переносящий) световых волн. Чтобы перейти к описанию этого явления необходимо дать понятие когерентности (от лат. cohaerentia — сцепление, связь).

Два и более волновых процесса называются когерентными, если разность фаз между ними сохраняется приблизительно постоянной в течение времени, достаточного для наблюдения.


Для двух приблизительно монохроматических источников (например, лазеров) условием когерентности является равенство частот излучения. Но для того, чтобы два источника естественного света были когерентны, они должны иметь общее происхождение: образованы участками фронта одного и того же источника (как, например, в опыте Юнга) или быть результатом деления амплитуды одного светового потока (как при интерференции в тонких пленках).

При наложении нескольких волновых процессов амплитуда результирующего поля зависит от разности фаз этих процессов, а разность фаз, в свою очередь, зависит от точки пространства. Таким образом, амплитуда светового поля, а следовательно и интенсивность результирующей волны, зависит от точки пространства.

В случае наложения монохроматических источников глаз фиксирует череду максимумов и минимумов освещенности. В случае суперпозиции потоков естественного света интерференционные максимумы для различных длин волн не совпадают, и человек видит череду максимумов, отвечающих различным цветам спектра. Примеры таких явлений в обычной жизни довольно многочисленны: цвета побежалости на металле, радужные разводы на пленке нефтепродуктов на поверхности воды, цветные полосы, наблюдаемые при падении света на оптический диск и т.д. Перераспределение энергии, возникающее при наложении когерентных волновых процессов, приводящее к образованию максимумов и минимумов интенсивности, называется интерференцией, а получившееся в результате

распределение интенсивности – интерференционной картиной. В схеме Юнга два когерентных источника получаются делением фронта волны одного источника. Интерференционная картина наблюдается на экране, расстояние до которого много больше расстояния между источниками.

В классическом опыте Юнга свет от источника (рис. 2) падает на узкую щель (1) (так мы увеличиваем радиус когерентности), а через нее – на две параллельные ей щели (2). Щели перпендикулярны плоскости рисунка. В области перекрытия полученных когерентных световых пучков на экране (Э) наблюдаются параллельные интерференционные полосы.

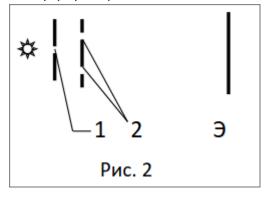

Пусть складываются две волны одной частоты с однонаправленными колебаниями и разностью фаз  $\delta$  :

$$E_1 = E_{01} cos(\omega t),$$
  $E_2 = E_{02} cos(\omega t + \delta).$ 

Согласно принципу суперпозиции световых волн, напряженность электрического поля результирующей волны  $E_0$  будет равна

$$E=E_1+E_2=(E_{01}+E_{02}*cos\delta)cos\omega t-E_{02}*sin\delta sin\omega t$$

Здесь использована известная из тригонометрии формула косинуса разности:

$$cos(\omega t + \delta) = cos(\omega t)cos(\delta) - sin(\omega t)sin(\delta)$$

По формуле вспомогательного аргумента

$$Acoslpha+Bsinlpha=\sqrt{A^2+B^2}cos(lpha-arctgrac{B}{A})$$

откуда из (1) получаем

$$E = \sqrt{(E_{01} + E_{02} * cos\delta)^2 + (E_{02} * sin\delta)^2} cos(\omega t - \phi) = \sqrt{E_{01}^2 + 2E_{01}E_{02}cos\delta + E_{02}^2} cos(\omega t - \phi)$$
  $\phi = arctg rac{E_{02}sin\delta}{E_{01} + E_{02}cos\delta}$ 

Результирующее колебание будет грамоническим колебанием с той же частотой и ампитудой

$$E_0 = \sqrt{E_{01}^2 + 2 E_{01} E_{02} cos \delta + E_{02}^2}$$

Так как интенсивность (среднее по времени значение вектора Пойнтинга) электромагнитной волны I пропорциональна квадрату напряженности электрического поля

$$I = \sqrt{rac{arepsilon_0 arepsilon}{\mu_0 \mu}} rac{E_0^2}{2} = \sqrt{rac{\mu_0 \mu}{arepsilon_0 arepsilon}} rac{H_0^2}{2}.$$

где I - интенсивность результирующей волны,  $I_1$  и  $I_2$  – интенсивности двух интерферирующих волн. Величина  $2\sqrt{I_1I_2}cos\delta$  называется интерференционным членом. От его значения зависит насколько и в какую сторону результирующая интенсивность будет отличаться от своего среднего значения  $I_{cp}=I_1+I_2$ .

Если

$$\delta=2m\pi$$
,

где m - целое число, то интенсивность максимальна, если

$$\delta = (2m+1)\pi$$

интенсивность — минимальна. Чередование минимумов и максимумов приводит к чередованию темных и светлых полос, называемых интерференционной картиной. Расстояние между соседними светлыми или соседними темными полосами (т.е. между соседними максимумами или соседними минимумами интенсивности) называют шириной интерференционной полосы.

Разность фаз  $\delta$  связана с оптической разностью хода  $\Delta\Theta$  и определяется соотношением:

$$\delta = rac{2\pi}{\lambda} \Delta, \Delta = L_2 - L_1,$$


где  $L_1$  и  $L_2$  – оптические длины двух лучей, идущих от источника до точки наблюдения (отрезку длиной l в среде с показателем преломления п соответствует оптическая длина L=nl),  $\lambda$  – длина волны излучения. Из уравнений (3) и (4) получаем, что условия интерференционного максимумов имеет вид:

$$\Delta = m\lambda$$
,


а минимумов

$$\Delta = (2m+1)\lambda/2,$$

где m - целое число

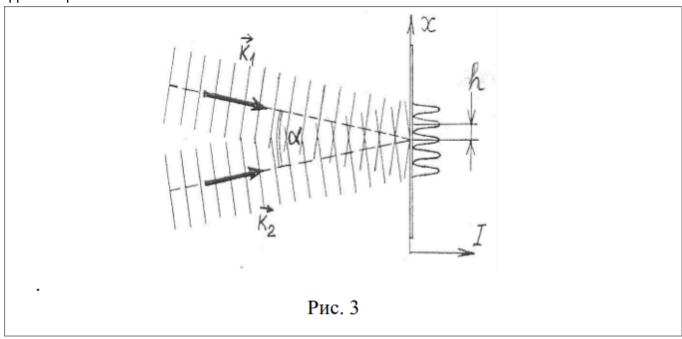

Две плоские волны, порожденные длинными параллельными щелями, с малым углом  $\alpha$  между направлениями распространения (рис. 3), на экране, перпендикулярном среднему направлению распространения, дают интерференционную картинку в виде чередующихся темных и светлых полос. Ширину интерференционной полосы h можно найти из рассмотрения треугольников  $S_1BC$  и  $S_2DC$  (рис. 4). Здесь d – расстояние между щелями, L – расстояние от щелей до экрана, на котором наблюдается интерференционная картина,  $l_1, l_2$  – геометрический путь волн от источников  $S_1, S_2$  до точки наблюдения.

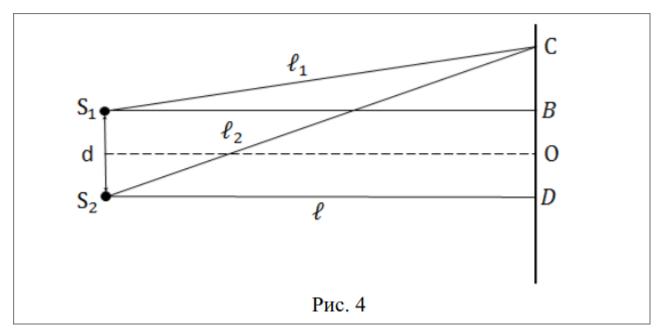

Обозначим расстояние от центра экрана до точки наблюдения |ОС| = х. Тогда

$$l_1^2 = |S_1C|^2 = |S_1B|^2 + |BC|^2 = l^2 + (x - rac{d}{2})^2,$$

$$l_2^2 = |S_2C|^2 = |S_2D|^2 + |DC|^2 = l^2 + (x + rac{d}{2})^2.$$

Найдем разность квадратов

$$l_2^2 - l_1^2 = 2xd.$$

Но, с другой стороны,  $l_2^2 - l_1^2 = (l_2 - l_1)(l_2 + l_1)$ .

Разность  $l_2-l_1$  равна геометрической разности хода волн и при условии, что  $n_1=n_2=1$ , эта разность будет определять оптическую разность хода (то есть  $l_2-l_1=\Delta$ ). В силу того, что расстояние между источниками света гораздо меньше расстояния от источников до экрана (d<< l), можно предположить, что  $l_1\approx l$  и  $l_2\approx l$ .

Тогда (7) запишем в следующем виде:

$$2\Delta l = 2xdux = \frac{l}{d}\Delta$$

Таким образом, если на расстоянии х от центра экрана будет наблюдаться максимум, то он будет удовлетворять условию (5), и тогда можно записать положение светлых полос следующим образом:

$$x_m=rac{l}{d}m\lambda,$$

Если же на расстоянии х от центра экрана будет наблюдаться минимум, то он будет удовлетворять условию (6), и тогда положение темных полос будет определяться как

$$x_m=rac{l}{d}(2m+1)rac{\lambda}{2}, m=0,1,2\dots$$

Рассматривая два соседних максимума или минимума, можно определить ширину интерференционной полосы h, как  $(x_m - x_{m-1})$ . После подстановки формул (8) или (9), получим:

$$h = \frac{\lambda L}{d}$$
.

При этом h при малых m не зависит от порядка интерференции m и является постоянным при заданных  $\lambda$ , L и d.


Сказанное позволяет предложить следующую методику определения длины волны. По фотографии определяются координаты интерференционных максимумов и строится зависимость координаты интерференционного максимума  $(x_m)$  от номера максимума (m), через точки графика проводится прямая, наилучшим образом аппроксимирующая эти точки. В рамках компьютерной обработки данных это означает расчет коэффициентов уравнения прямой на основе метода наименьших квадратов. Тангенс угла наклона данной прямой (иными словами, коэффициент при аргументе линейной зависимости A) на основании (8) равен  $\lambda L/d$ , и длина волны может быть вычислена по формуле

$$\lambda = rac{Ad}{L}$$

Координаты максимумов удобно отсчитывать от нулевого максимума (максимума, соответствующего m=0). Однако аппроксимировать данные следует зависимостью вида Y=Ax+B, поскольку при обработке экспериментальной картины как установка точки начала отсчета координаты, так и определение координат остальных интерференционных максимумов осуществляется с определенной погрешностью. Построение прямой вида Y=Ax+B делает все точки равноправными, что позволяет в максимальной степени компенсировать погрешность отдельного измерения координаты.

### 5. Описание лабораторной установки

Источник света в лабораторной установке смонтирован на первой стойке и состоит из двух компонентов (рис. 5) – полупроводникового лазера 1 и собирающей линзы 2 в оправке, роль которой состоит в преобразовании параллельного пучка света в расходящийся пучок, имитирующий излучение точечного источника света. Направление луча лазера изменяется при вращении юстировочных винтов, расположенных на наружной стороне источника света. Выбор положения линзы обеспечивается креплением ее на поверхности оправки с помощью магнитов.

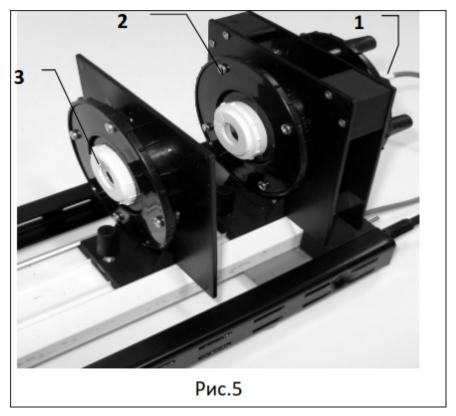

На следующей стойке размещается дифракционный объект «Щели Юнга», магнитное крепление которого позволяет перемещать объект в плоскости, перпендикулярной пучку света. Расстояние между щелями составляет 80 мкм, а ширина щелей равна 20 мкм.

На третьей стойке смонтирован экран, с тыльной стороны которого расположена веб-камера для съемки с фиксированного расстояния интерференционной картины на экране.

#### 6. Порядок проведения лабораторной работы

- 1. Подключите веб-камеру, присоединив ее кабель к USB-входу компьютера.
- После включения компьютера запустите программу «Практикум по физике». В открывшемся окне с предупреждением об отсутствии 9 измерительного устройства нажмите «ОК». На панели устройств выберите соответствующий сценарий проведения эксперимента (Alt+C). В окне «Устройство видеозахвата» выберете «USB Camera».
- 3. Включите источник света. Для этого подключите блок питания (сетевой адаптер) к разъему в корпусе кнопочного выключателя, включите блок питания в сеть и нажмите кнопку включения лазера.
- 4. Снимете оправку с линзой и оправку с элементом «щели Юнга» со стоек и получите на экране яркую точку от лазерного луча. Вращая юстировочные винты на оправке лазера, установите луч в центр экрана.

- Вкручивая юстировочный винт по резьбе, обращайте внимание, чтобы диаметрально противоположный винт при этом не касался упорного кольца оправки.
- 5. Установите линзу на стойку и, передвигая ее на магнитном креплении вверх-вниз и вправо-влево, полностью осветите экран. Следите, чтобы центр пятна света совпадал с центром экрана.
- 6. Закройте экран светозащитным кожухом и сфотографируйте изображение освещенного экрана (кнопка). Сохраните изображение в папке, соданной Вами. Этот снимок потребуется для определения масштаба изображения интерференционной картины.
- 7. Используя цифровой инструмент «окружность» (кнопка в строке над таблицей) постройте окружность, совпадающую с внешней границей ярко освещенного круга на фотографии. Для этого сначала подведите указатель мыши к предполагаемому центру окружности и щелкните левой клавишей. После этого «растягивайте» радиус окружности, снова нажав на левую клавишу мыши. После построения окружности, примерно совпадающей с изображением границы освещенного круга, подстройте ее положение (захват мышью за любую точку окружности) и радиус (захват центра или точки, в которой оканчивается видимый на экране радиус окружности).
- 8. Захватите указателем мыши один из концов масштабного отрезка (небольшой отрезок зеленого цвета в левом верхнем углу окна с фотографией) и поместите его на построенную окружность. Аналогичным образом поместите второй конец масштабного отрезка в диаметрально противоположную точку окружности, при этом, естественно, масштабный отрезок должен пройти через ее центр. Нажмите кнопку ввода масштаба, и в открывшемся диалоговом окне введите видимый диаметр освещенного круга, составляющий 46 мм.
- 9. Установите на стойку элемент «щели Юнга» (он должен располагаться в 5-6 см от линзы) и, смещая его на магнитном креплении вверх-вниз и вправо-влево, получите интерференционную картину в центре экрана. Элемент «щели Юнга» устанавливается в расходящемся пучке света за фокусом линзы. Приближение его к фокусу линзы увеличивает яркость картины на экране, но может несколько затруднять процесс получения картины на экране, т.к. в этом случае объект устанавливается в световой луч меньшего диаметра.
- Пользуясь линейкой на оптической скамье, определите расстояние от экрана до щелей Юнга. Запишите его значение.
- 11. Перейдите на вкладку «Камера» и, закрыв экран светозащитным кожухом, в рабочем окне «Камера» сохраните изображение в файл с

- помощью экранной кнопки . На вопрос программы о сохранении положения осей координат и масштабного отрезка здесь и далее следует отвечать положительно.
- 12. Выключите питание лазера и приступите к обработке записанной информации в окне файла изображения.
- 13. Перенесите масштабный отрезок на край фотографии, свободный от изображения интерференционной картины. Для этого следует захватить его указателем мыши (левая кнопка) за любую внутреннюю точку. Нельзя захватывать концы масштабного отрезка, т.к. это приведет к изменению его длины и необходимости повторения процедуры ввода масштаба.
- 14. Совместите центр системы координат (небольшой зеленый крест в левом нижнем углу фотографии) с серединой центральной полосы интерференционной картины. Для этого захватите точку начала отсчета указателем мыши и поместите ее в выбранную точку. Увеличьте изображение системы координат, потянув одну из крайних точек креста по направлению от центра и, удерживая указателем мыши эту точку, поверните систему координат так, чтобы направление интерференционных полос совпадало с вертикальной осью системы координат.
- 15. Используя цифровой инструмент «точка» (кнопка в строке над таблицей), внесите в таблицу х- координаты всех зарегистрированных интерференционных максимумов, включая нулевой. Запись появляется в таблице после фиксации указателя мыши на середине интерференционной полосы.
- 16. Нажмите кнопку с символом, тем самым вызвав на экран таблицу обработки данных. Поместите указатель (черный треугольник на синем поле в левом столбце) в строку с определенным значением m, например m=-2, выберите в исходной таблице строку, соответствующую данному порядку интерференции и нажмите символ. При этом х-координата выбранного максимума будет перенесена в таблицу обработки.
- 17. Действуя аналогичным образом, перенесите в таблицу координаты всех остальных интерференционных максимумов.
- Перейдите на вкладку график, в окне выбора аппроксимирующей зависимости выберите линейную функцию вида Y=AX+В и постройте указанную прямую, нажав на кнопку.
- Выпишите коэффициент при X и среднеквадратичное отклонение этого коэффициента. На основании формулы (12) определите длину волны излучения. Обратите внимание, что размерность коэффициента А

- соответствует единице измерения, использованной при вводе масштаба. Геометрические параметры щелей приведены в разделе 5.
- 20. Используя среднеквадратичное отклонение величины А, оцените погрешность измерений.
- 21. Включите в отчет (кнопка ) результаты, полученные в пунктах 11 12, 16 21.

#### 8. Контрольные вопросы

- 1. Определение монохроматических и когерентных волн: Монохроматические волны это волны с одной частотой (или длиной волны) и постоянной фазой. Когерентные волны это волны, которые имеют одинаковую частоту и постоянную разность фаз во времени.
- 2. Определение явления интерференции света: Интерференция света это явление наложения двух или более световых волн, при котором в одних точках пространства происходит усиление света (максимумы), а в других ослабление (минимумы).
- Что называется интенсивностью излучения?
   Интенсивность излучения это количество энергии, передаваемой электромагнитной волной через единицу поверхности в единицу времени.
- 4. Как определяется интенсивность излучения двух складывающихся когерентных волн?
  Интенсивность излучения двух когерентных волн определяется как сумма их амплитуд с учётом фазовой разности. Если волны имеют одинаковую частоту и постоянную разность фаз, их интенсивности складываются в зависимости от их фазы.
- 5. Напишите и объясните условия максимума и минимума интенсивности света при интерференции: Максимум интенсивности света при интерференции наблюдается, когда разность фаз двух волн кратна 2π (условие: Δφ = 2πn, где n - целое число). Минимум интенсивности наблюдается, когда разность фаз равна нечётному числу π (условие: Δφ = (2n+1)π, где n - целое число).
- Выведите расчетную формулу для определения длины волны в данной работе:
   Формула для определения длины волны λ в интерференционном эксперименте: λ = (d x) / (L m), где d расстояние между щелями, х расстояние между максимумами (минимумами), L расстояние до экрана, m порядок максимума (минимума).

#### Результаты эксперимента

Переменная	Значение
$x_0$	0
$x_1$	5,03
$x_2$	9,40
$x_{-1}$	-4,70
$x_{-2}$	-9,70
d	$80*10^{-3}$
L	650mm

#### Выполнение

$$A_1=rac{x_0+x_1+x_2}{3}=4,81mm$$
  $A_2=rac{x_0+|x_{-1}|+|x-2|}{3}=4,59mm$   $\lambda_1=rac{A_1*d}{L}=rac{4,81mm*80*10^{-3}mm}{650mm}=592nm$   $\lambda_2=rac{A_2*d}{L}=rac{4,59mm*80*10^{-3}mm}{650mm}=565nm$ 

#### Вывод

Полученная в результате вычислений и экспреримента длина волн (592нм и 565нм) находятся в спектре цвета близко к красному, из чего можно сделать вывод, что выведенная формула верна

$$|A| = rac{(x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + (|x_{-1}| - x_0) + (|x_{-2}| - |x_{-1}|)}{4} = rac{x_2 - x_0 + |x_{-2}| - x_0}{4} = 4,62nm$$
  $\sigma_A = \sqrt{rac{(x_1 - x_0 - |A|)^2 + (x_2 - x_1 - |A|)^2 + (|x_{-1}| - x_0 - |A|)^2 + (|x_{-2}| - |x_{-1}| - |A|)^2}{4}} = 0,27nm$